

Geburts- und Entbindungsbett Affinity™ Four

Eine sichere Entbindung



Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom

Die perfekte Kombination aus Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit



In der Wehen- und Entbindungsphase zählt jede Sekunde. Vor allem in Notsituationen muss das Personal schnell und ohne Komplikationen handeln können.

Mit dem Modell Affinity Four steht Ihnen ein sicheres Geburts- und Entbindungsbett zur Verfügung, das sich auch in Phasen hoher Belastung als außerordentlich bedienerfreundlich erweist. Mit dem Affinity Four **Stow and Go™**-Mechanismus kann das integrierte Fußteil während der Geburtsphase einfach unter das Bett geschoben und danach wieder herausgezogen werden. Wenn Sie sich für die ergonomische Ausführung mit abnehmbarem Fußteil entschieden haben, brauchen Sie das Fußteil nur auf den angebauten Sockel zu stellen.




Ergonomisch geformte Schiebegriffe und fest angebrachte Infusionsständer.

Für schnelles und einfaches Handeln in jedem Moment konzipiert


Geringerer Zeitaufwand, weniger Hektik

In der Wehen- und Entbindungsphase zählt jede Sekunde. Oft hat das Personal nicht mal ein paar Minuten Zeit, um nach Geräten oder Anschlüssen zu suchen, geschweige denn komplizierte Steuerelemente zu bedienen. Das Geburts- und Entbindungsbett Affinity Four wurde mit dem Ziel entwickelt, das Personal bei seiner Arbeit zu entlasten.

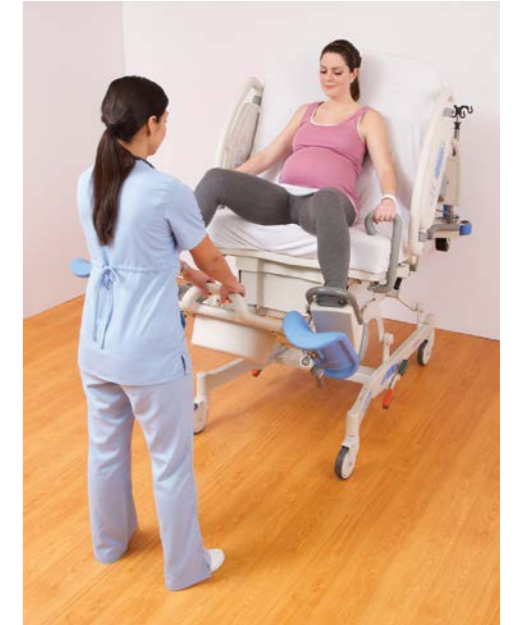

- Das **Stow and Go**-Fußteil kann unter das Bett geschoben und dort gelagert werden – kein Herausheben erforderlich. Das Fußteil rastet auf einfache Weise stets an der richtigen Stelle ein, ohne dass sich das Bettzeug darin verfangen kann.
- Der **Zusatzakku** ermöglicht dem Personal die Verwendung aller Bettfunktionen einschließlich Höhen- und Positionsverstellung auch ohne Netzanschluss, was in kritischen Situationen wertvolle Zeit spart.
- Der von einer **Gasdruckfeder unterstützte Trendelenburg**-Mechanismus realisiert für die Kopfhochlagerung einen Neigungswinkel von 8 Grad.
- Die **OneStep**-Bedienung der Seitensicherung ermöglicht eine bequeme Umbettung und gewährleistet somit einen sicheren und mühelosen Transport des Patienten.
- Das **optimierte Design** des Bettes mit seinen integrierten Bauteilen, die nicht hervorstehen, schützt das Personal, wenn es sich schnell um die Patientin herum bewegen muss.



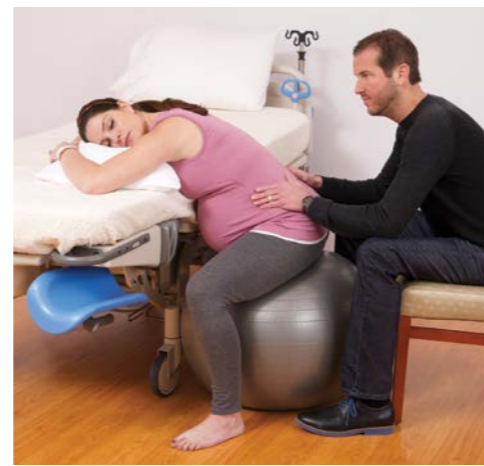

Optimales Voranschreiten der Wehenphase Mit dem Geburts- und Entbindungsbett Affinity Four

Flexibles Design unterstützt unterschiedliche Geburtspositionen

Die Wehen und Entbindungsphasen sind von Frau zu Frau unterschiedlich. Bei manchen Frauen kann der Entbindungsvorgang langwierig sein, bei anderen kann er sehr schnell verlaufen. Das flexible Design des Geburts- und Entbindungsbettes Affinity Four verfügt über mehrere Positionierungsmöglichkeiten, um die Phasen und die Intensität der Wehen zu unterstützen und schließlich deren Verlauf zu fördern.

Wichtige Funktionen für ein optimales Voranschreiten der Wehenphase:

- Die Möglichkeit, den Fußbereich des Bettes abzusenken, zur Unterstützung der Sitzposition und der Position der Hände und Knie
- Die Wadenstütze des Geburts- und Entbindungsbettes hält die Oberschenkel in der Seitenlage oben
- Der Wehenhaltebügel kann nicht nur in der Sitz- oder Hockposition, sondern auch in der Tauziehlage verwendet werden
- Die Vielseitigkeit des Geburts- und Entbindungsbettes Affinity Four fördert den Wehenvorgang sowohl im Krankenhaus als auch im Geburtshaus.



Sitzposition



Auf allen Vieren



Seitenlage



Hocke



Tauziehlage



Fowler-Lage

Verschiedene Sicherheitsfunktionen für das Bett

Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit

Hill-Rom hat alle Details des Geburts- und Entbindungsbettes Affinity Four mit dem Ziel entwickelt, die Geburt eines Kindes für das Personal und die werdende Mutter sicherer zu gestalten.

- Das **Fußteil** lässt sich fest und mühelos **einrasten**.
- Die **EasyGlide-Wadenstützen** lassen sich sehr einfach positionieren und mit einem Handgriff sicher arretieren.
- Der durch neue Federn und Dichtungen verbesserte **Trendelenburg-Mechanismus** ermöglicht das einfache Anheben und Absenken durch eine Person.
- Ein **aufblasbares Luftkissen** im Rücken- und Gesäßbereich macht ein Umlagern der Patientin überflüssig (modellabhängig).
- **Vier Laufrollen mit Zweifachverriegelung** sorgen für einen sicheren Stand des Bettes.
- Die **Hill-Rom Schaumstoffmatratze zur Druckumverteilung** bietet Komfort, vor allem für den empfindlichen Sitzbereich (modellabhängig).
- Die **automatische Beckenneigung und optionale Matratze mit V-Ausschnitt** bieten einen besseren Zugang zur Patientin während der Geburt.



Es ist ein **Fußteil zum Abnehmen** erhältlich (modellabhängig). Das Fußteil ist leicht und einfach zu handhaben und kann in einem angebauten Sockel abgestellt werden.



Die **EasyGlide-Wadenstützen** sind großzügig bemessen und mit einem stabilen Bedienungshebel ausgestattet, der aus jedem beliebigen Winkel mit einer Hand aktiviert werden kann.



Die **automatische Beckenneigung von 15°** kann der werdenden Mutter sowohl in der Wehenphase als auch bei der Geburt helfen, die richtige Position einzunehmen.



Ergonomisch geformte Griffe und Seitensicherungen erleichtern der werdenden Mutter das Aufrichten und Bewegen im Bett.

Technische Daten

Sichere Arbeitslast	227 kg
Maximal zulässiges Patientengewicht	213 kg
Länge des Bettes	234 cm
Breite des Bettes	
Seitensicherung hoch	99 cm
Seitensicherung runter	91 cm
Betthöhe	
Tiefste Position (mit Matratze)	56 cm
Höchste Position (mit Matratze)	97 cm
Max. Höhe des Gesäßbereichs in Trendelenburg-Position	102 cm
Matratze	
Länge	198 cm
Breite	89 cm
Stärke (Rückenlehnenbereich)	12,7 cm
Stärke (Unterschenkelbereich)	8,9 cm

Winkeleinstellungen	
Max. Verstellwinkel für die Rückenlehne.	63°
Max. Verstellwinkel für den Gesäßbereich	15°
Max. Verstellwinkel für die Trendelenburg-Position	8°
Maximale Hebekapazität	
Bett	227 kg
Fußteil	181 kg
Rollen	15 cm
Gewicht des Bettes	
Lift-off	217 kg
Stow and Go	232 kg
Produktnummer	P3700 E

Standards

- Zusatzakku
- Automatisches Nachtlicht
- Abnehmbares oder unter das Bett einschiebbares Fußteil
- Automatische Beckenneigung
- Schaumstoffmatratze zur Druckumverteilung (modellabhängig)
- 4 Rollen mit Verriegelung
- Auffangschale für Flüssigkeiten
- Zentralfeststellung der Rollen mit Lenkrolle
- CPR-Notabsenkung
- Verriegelungsanzeige
- Griffe für die Geburtswehenphase
- OneStep-Entriegelungsmechanismus für Seitensicherung
- Trendelenburg-Position
- Fußstützen

Zubehör

- Anaesthesia Screen
- ISS-System
- Wehenhaltebügel
- Wadenstützen – angehängt
- Sauerstoffflaschenhalter
- Teleskopische Wadenstützen
- Pendant Control
- Einweglaken
- Fest angebrachter Infusionsständer
- Haken für Drainagebeutel
- Bettzeug
- Beinstützen – angehängt
- Bezug – Fußteil
- Teleskopische Beinstützen
- Bezug – Rückenlehne

Optionen

- Kopfhaut mit verschiedenen Laminatoberflächen
- Sidecom™ Kommunikationssteuerung*
- Ergonomisch geformte Schiebegriffe und angebaute Gabel für Infusionsständer
- Integrierte Infusionsschlauchführung
- Fest angebrachte Infusionsständer

* Diese Option ist in Ländern, in denen das CE-Zeichen vorgeschrieben ist, nicht erhältlich.

Hill-Rom ist ein weltweit führendes Medizintechnik-Unternehmen, das mehr als 10.000 Angestellte auf der ganzen Welt beschäftigt. Gemeinsam mit Anbietern von Pflegedienstleistungen in über 100 Ländern konzentrieren wir uns auf Versorgungslösungen für pflegebedürftige Patienten, um klinische und wirtschaftliche Ergebnisse in fünf Kerngebieten zu verbessern: **Förderung von Mobilität, Wundversorgung und -vorbeugung, Patientenüberwachung und Diagnostik, Sicherheit und Effizienz in der Chirurgie und Atemwegsgesundheit.** Die Mitarbeiter, Produkte und Programme von Hill-Rom verfolgen nur ein Ziel: **Jeden Tag optimieren wir rund um die Welt die Ergebnisse für Patienten und ihre Pflegekräfte.**



Hill-Rom lebt das Mobility is Life™-Konzept, das durch eine frühzeitige Mobilisation und die Förderung der Eigenständigkeit von Patienten wesentlich zu deren Lebensqualität beiträgt – im Krankenhaus sowie in ihrer gewohnten Umgebung.

Das Geburts- und Entbindungsbett Affinity Four ist für Frauen im gebärfähigen Alter für die Wehen-, Entbindungs- und Erholungsphase oder Wehen-, Entbindungs-, Erholungs- und Nachgeburtsphase für die Akutversorgung bei den Wehen und der Entbindung vorgesehen.

Klasse I

Hersteller: Hill-Rom Inc. - 1069 Indiana 46 - Batesville 47006 IN - USA

EU-Vertretung: Hill-Rom S.A.S. - BP 14 ZI du Talhouët - 56330 Pluvigner, - Frankreich

Diese Medizinprodukte unterliegen gesetzlichen Bestimmungen und sind dementsprechend mit dem CE-Zeichen versehen. Hill-Rom empfiehlt, die umfassenden Begleitdokumentationen der Medizinprodukte zu deren sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch sorgfältig durchzulesen. Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Wartung dieser Medizinprodukte ist das Personal der Gesundheits- bzw. Pflegeeinrichtungen verantwortlich.

Hill-Rom behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Hill-Rom ist die sich auf den Kauf oder die Vermietung der Produkte beziehende ausdrückliche schriftliche Garantie.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Dok.-Nr. 5DE137303-04, 19 Juli 2017

Nicht alle Produkte/Optionen sind in allen Ländern verfügbar.
Weitere Information zu diesem Produkt bzw. Services erhalten Sie bei Ihrem Hill-Rom Ansprechpartner vor Ort oder auf unserer Website:

www.hill-rom.com

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom